

# 筋膜リリースガン

## 取扱説明書



この度弊社の筋膜リリースガンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用する前に、必ず本書を真面目にお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書につきましては万全を尽くして作成しておりますが、万が一何かご不明の点、誤り、記載漏れなどお気づきのことがあればございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。

# 目次

1. 警告	1
2. 各部の名称	2
3. 製品仕様	2
4. 操作方法	3
5. マッサージヘッド使用のご紹介	4
6. バッテリーの使用と注意事項	5
7. 充電注意事項	5
8. 安全上のご注意	6
9. 免責事項	7
10. メンテナンス	8
11. アフターサービス	8

 **警告**

- 1.ご使用中に、傷つかないように、指やほかの物をマッサージヘッドと機体の隙間に挿入したり、触れたりしないでください。
- 2.同じ部分に長時間当て過ぎないようにしてください。
- 3.骨や筋肉の弱いところに当たらないでください。
- 4.骨粗しょう症、ペースメーカーを使用されている心臓疾患のある方、妊婦、乳児、未成年者、いかなる身体的外傷又はその他の病気がある人にはご使用する前に、必ず医師に相談してください。
- 5.痛みや異常を感じる場合、すぐに使用を中止してください。
- 6.本製品は医療機器ではありません。

## 各部の名称



## 製品仕様

モデル	V1
定格電圧	7.4V
定格電力	18W
バッテリー容量	1800mAh
充電	5V/2A
最大回転スピード	3200rpm/ 分間
充電時間	約 1 時間
製品サイズ	166×130×50mm
製品重量	700g
振動レベル	99 段階
色	グレー

## 操作方法

### 電源オンとレベルの切り替え



図1



図2



図3



図4

**1. 電源を入れる：**電源ボタン↓を1.5秒ぐらい押し続けて、電源を入れます。電池残量の指示ランプが青く点灯し、レベルポジションが01と表示され、起動が完了したことが示されます。

**2. レベルを変更：**開始状態で+ボタンを押すと、レベルが上がりります。+ボタンを押すたびに、新しいレベルが追加されます。「+」ボタンを長押しすると、最高レベルに達するまでレベルが急速に上昇します。最初のレベルにサイクリングした後、レベルは再び上昇します。

**3. バッテリー残量表示：**6つのライトが現在のバッテリー残量を示します。フル充電の場合、6つのライトがすべて点灯します。1つのライトだけが点灯している場合は、バッテリー残量が20%しかありません。すぐに充電してください。

**4. 電源を切る：**電源ボタン↓を1.5秒間押し続けると電源が切れます。

**ご注意：**本製品は15分間動作すると自動的にシャットダウンします。再度使用する場合は、電源ボタンをもう一度押してください。

## マッサージヘッド使用のご紹介

本筋膜ガンは8つのマッサージヘッドを付きますので、あらゆる筋肉群を細かくマッサージすることができます。



### 球型

首と脊椎、腕、太ももの大きい筋肉群に適用します。




### U字型

肩首、足の付け根などのリラックスに適用します。



### 円型

あらゆる部位のリラックスやトレーニングに適用します。

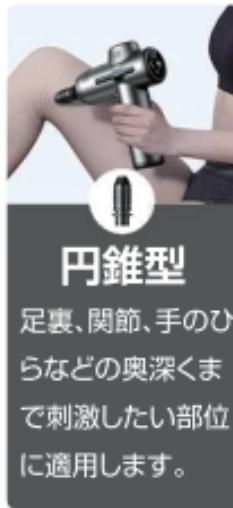

### 円錐型

足裏、関節、手のひらなどの奥深くまで刺激したい部位に適用します。



### 三日月型

腰、背中、太ももの大きい筋肉群に適用します。



### T字型

ボディーマッスルのリラックスに適用します。



### 円筒型

腹部大腿溝、下腿に適用します。



### 爪型

臀部や大腿などのマッサージに適用します。

## バッテリーの使用と注意事項

1. 本製品は7.4V、18WHのバッテリーを搭載していますので、安全性が高い、レベル1で最大3時間連続稼働できます。
2. 電源切れの状態からフル充電まで1時間がかかります。
3. バッテリーを長持ちさせるには毎回使用後、電源をオフにしてください。  
ご注意:ご自分で本製品を分解したり、バッテリーは取り出さないでください。

## 充電注意事項

1. 付属ケーブル、5V-2A のアダプターを使用して本筋膜リリースガンを充電してください。
2. 損傷した充電ケーブルは使用しないでください。充電ケーブルが損傷した場合は、新しいのを交換してください。
3. ケースが損傷したり、電圧が正しくない充電器（アダプター）を使用して本製品を充電しないでください。
4. 濡れた手で充電ケーブルや電源アダプターに触れたり、充電ケーブルを引っ張って充電ケーブルや充電器(アダプター)を取り外さないでください。
5. 濡れた手で本製品や充電器(アダプター)に触れないでください。短絡、故障、感電の恐れがあります。
6. アダプターが雨、液体、またはひどい湿気にさらされた場合は、使用を中止してください。

## ⚠ 安全上のご注意

感電、やけど、怪我や損傷などのリスクを避けるには必ず下記の注意事項をお読みください。

1. 子供や意識のない方に本製品を操作、使用させないでください。本製品は子供の手の届かないところに置いてください。
2. 本製品は直接皮膚表面にマッサージしないでください。皮膚に怪我をしないように、適切なマッサージヘッドを交換して使用してください。同じ部位に連続60秒以上当たらないでください。
3. 痛みや不快感のない場合でも、高いレベルは体の軟組織部のみ使用でき、頭や筋肉の被覆が少ない骨に使用することは禁じられます。
4. 各部位のマッサージ要求によって、適切なマッサージヘッドをご使用ください。
5. 同じ部位に高いレベルで長時間使用する場合は怪我される可能性がありますので、痛みや不快感を感じ場合、直ぐに使用を中止してください。
6. 指、髪の毛、その他の毛がある部分をマッサージヘッドのシャフトや後ろに近づけないでください。引っかかって怪我される可能性があります。
7. 本製品は防水仕様ではないので、製品を水に浸したり、濡れた手で本製品を操作したりしないでください。
8. 本製品を投げたり、誤って操作したりしないでください。
9. 他の充電器を使用して充電することは禁じられています。付属の充電器を使用して充電してください。
10. 充電中の使用は禁じられています。
11. 毎回使用する前に、製品が正常に使用できるかどうかをよく確認してください。
12. 落下事故の原因となりますので、製品の上に直接立ったり座つたりしないでください。
13. モーターの温度上昇による故障を避けるため、使用中にマッサージャーを覆わないでください。

## 免責事項

本製品を使用する前に必ず取扱説明書をよく読み、指示に従ってください。取扱説明書に従わない不適切な使用によって生じた物的損害または人身傷害について当社は責任を負いません

※医師の事前の同意なしに、以下の状況で使用することが禁じられます。

1. 妊娠、糖尿病性合併症(神経障害や網膜損傷など)、ペースメーカーに損傷がある、最近手術を受けたところ、てんかんまたは片頭痛、椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、脊椎すべり症、または強直性脊椎炎のある方。

2. 最近、人工関節置換術または子宮内避妊器具を使用した、または健康上の問題を抱えている人、虚弱体質の方。

これらの禁忌は、本製品を使用できないという意味ではありません。

本製品を使用する前に必ず医師に相談してください。

### ⚠ 警告

1. 本製品を液体のかかるところ、熱源、火源の近くに置いたり、使用したりしないでください。
2. 本製品をご自分で分解したり、改造したりしないでください。
3. 医師の事前の同意なしに、怪我がある部位に本製品を使用しないでください。

## メンテナンス

1. 少し濡れたタオルで本製品の表面を軽く拭き、乾いた柔らかい布で拭いてから乾燥してください。
2. 使用せずに長期間保管する場合は、バッテリーをフル充電して、本製品をパッケージに戻してください。
3. 本製品を長時間使用しないでください。1時間稼働させた後、電源をオフにして、30分以上時間をおいてから再度使用してください。

## アフターサービス

使用中、製品について質問または意見がございましたら、いつでも気軽にお問い合わせてください。万が一「初期不良」、「自然故障」等の場合は、ご注文番号をご用意の上、アフターサービスにご連絡頂ければ交換品のお手配等、各種サポートを速やかに提供させていただきます。ご安心してお買い求め下さいませ。心よりご連絡を待ちしております。

LINE:@200oftyf

返信時間：平日～

午前：10:00-13:30

午後：15:00-19:00

(祝日・年末年始を除く)



友だち追加



LINE:@200oftyf